

RONDO 2

Nunca foi tão fácil

Incrivelmente simples

Incredivelmente fácil de usar por meio de ativação por um único toque e controle sem o uso das mãos.

Estilo discreto

Seu design elegante e leve é confortável, mesmo com óculos, e desaparece facilmente sob o cabelo.




Mesque ou destaque

Altere entre cores sutis e padrões elegantes em um instante com as novas capas estilizadas.

Totalmente recarregável

A bateria recarregável de íons de lítio integrada garante um dia inteiro (até 18 horas) de funcionamento.

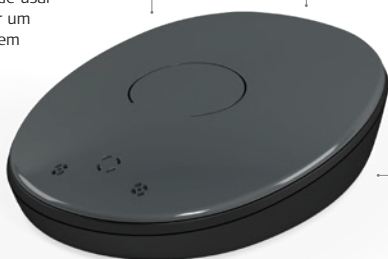

Carregamento sem fio

Diga adeus às baterias descartáveis - basta colocar o RONDO 2 em seu carregador.



Encontre-se com o futuro
dos processadores de áudio

Carregamento sem fio

O RONDO 2 faz uso da tecnologia Qi para recarregar sua bateria integrada de íons de lítio sem fio. Isso significa o fim do incômodo de abrir o processador para trocar as baterias. O RONDO 2 é incrivelmente fácil de usar, em especial para usuários com destreza manual limitada.

Basta colocar o RONDO 2 no carregador que ele começa a carregar. Quatro horas de carregamento garantem energia para o dia inteiro (até 18 horas). O mini compartimento de bateria também dispõe de uma opção auxiliar que permite alimentar o RONDO 2 diretamente com uma bateria AAA.



Triformance® | Para uma audição mais natural

O RONDO 2 dispõe de Triformance para uma audição mais natural em qualquer ambiente acústico. Triformance é a combinação de três tecnologias da MED-EL que funcionam em sinergia para proporcionar a audição mais natural possível aos nossos pacientes.



Ouça o dia inteiro
Carregue à noite
É simples assim

Uma nova era em audição

Por que o RONDO 2 é tão revolucionário? Pela primeira vez, não há necessidade de trocar as baterias ou manipular botões. Pense nas possibilidades - ouvir sem qualquer complicação. O RONDO 2 é incrivelmente fácil de usar - o que o torna perfeito para todos os que desejam um processador de áudio que combina estilo discreto com simplicidade.



Incrivelmente simples
Carregamento sem fio e controle automatizado transformam o RONDO 2 no processador de áudio mais fácil de usar.



Baixa manutenção
Não há mais necessidade de adquirir baterias descartáveis ou substituir cabos, economizando desse modo tempo e dinheiro.



Conectividade
A telebobina integrada facilita a conexão com o colar de indução Bluetooth e outros acessórios.



Pronto para enfrentar a água
O RONDO 2 foi projetado para ser resistente a água, tornando-se totalmente à prova d'água com o acessório WaterWear.



Conforto o dia inteiro
Projetado para ser usado totalmente fora da orelha, oferece um conforto de uso excepcional, mesmo com óculos.



Segurança extra
O desenho leve e as opções flexíveis de fixação garantem que o RONDO 2 fique precisamente no lugar.

Dados técnicos


Processador de áudio de peça única RONDO 2 (Me1150)



Tamanho real



14,9 g com ímã e capa

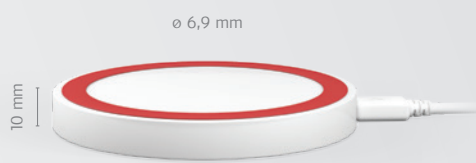

Processador de áudio RONDO 2 (Me1150)

Características do produto

- Design multifuncional
- Design à prova de respingos de água com classificação IP54
- Capas fáceis de trocar em 34 desenhos e cores
- Gerenciamento automático do som (AGC)
- Microfone omnidirecional
- AGC de loop duplo
- Faixa dinâmica de entrada de 78 dB (28 dB a 106 dB NPS)
- Suporta 250 bandas espectrais
- Função de verificação de link com indicador de LED
- Botão Liga/Desliga no processador
- Controle remoto FineTuner
- Controle contínuo do volume e da sensibilidade
- Quatro posições de programas

Bateria recarregável

- Bateria de íons de lítio integrada
- Recarga sem fio via carregador Qi compatível
- Até 18 horas de uso por carga
- A vida útil da bateria é normalmente superior a 5 anos
- Mini compartimento de bateria oferece uma opção de alimentação complementar com bateria AAA

Conectividade

- Telebobina integrada

Força do ímã

Disponível com ímãs de três forças para uso com os implantes SYNCHRONY e quatro forças para utilização com outros ICs da MED-EL

Estratégias de codificação sonora

Estratégias disponíveis por meio do software do sistema MAESTRO 7.0:



- FS4 (processamento de estrutura fina até 1 kHz em 4 canais apicais)
- FS4-p (processamento de estrutura fina até 1 kHz em 4 canais apicais com estimulação paralela inteligente para maior precisão temporal)
- FSP (processamento de estrutura fina em geral de até 350 Hz em dois canais apicais)
- HD-CIS (CIS de alta definição)

Opções de cores

Capas fáceis de trocar disponíveis em diferentes cores, designs e tipos de cabelo



Capas estilizadas

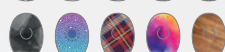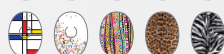

Capas imitando tipos de cabelo



Carregador

Carregador

- Alimentado via USB: 5 V CC, 1 A
- Alimentação de energia por USB: 100–240 V AC (~50/60 Hz)
- Protocolo de carregamento Qi sem fio
- LED indicador de energia

RONDO 2 Kit

- 35351 Kit RONDO 2 MAESTRO Core
- 30459 Unidade Controle RONDO 2
- 31255 Ímã RONDO 2 força 3
- 35318 RONDO 2 Clips
- 36285 Carregador sem Fio
- 34706 Bolsa diária tamanho M
- 37828 Power Supply
- 33686 GripWear
- 03132 FineTuner
- 04048 Tester
- 35350 RONDO 2 DesignCov. ColMix (4)
- 35679 RONDO 2 Design Cover Flyer
- 36308 RONDO 2 Manual Portuguese

Registro no Ministério da Saúde: 81692270013

NCM: 9021.40.00

Fabricante: MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.

Procedência: Innsbruck, Áustria

Garantia: 3 anos (a partir da ativação)

Carregador não fabricado pela MED-EL.

MED-EL do Brasil

Rua Cel. Diogo, 1060, Jardim da Glória | 01545-001 - São Paulo - SP, Brasil |

office@br.medel.com

medel.com/br

